


EyeMag Pro - loupes médicales
Une nouvelle vision des choses.



Loupes binoculaires à usage médical EyeMag® Pro F et EyeMag® Pro S Des optiques qui satisfont aux exigences professionnelles les plus élevées.

Pour pouvoir optimiser le traitement de vos patients, vous devez bien voir tous les détails. Les loupes binoculaires EyeMag Pro de Carl Zeiss vous fournissent des images stéréoscopiques brillantes. Elles vous aident ainsi à mieux distinguer les structures les plus fines et à améliorer encore la qualité de votre travail. Choisissez votre loupe individuellement dans une large gamme de grossissements et de distances de travail. Deux types de supports sont disponibles au choix : une monture de lunettes en titane (F) et un système de serre-tête (S). L'excellente qualité optique d'EyeMag Pro vous séduira d'emblée.

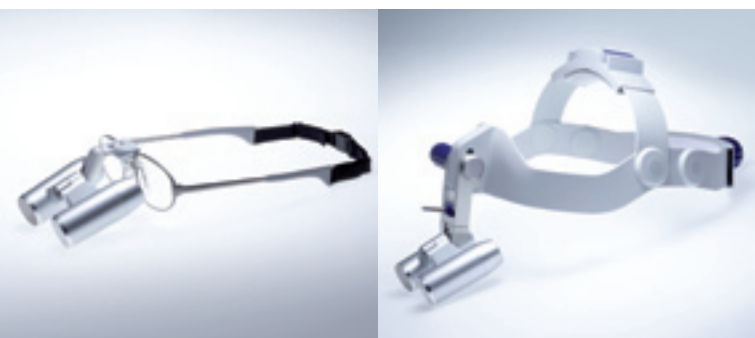

EyeMag Pro F

EyeMag Pro S

Systèmes optiques					
Distance de travail (mm)	500	500	450	450	400
Distance de travail (pouces)	20	20	18	18	16
Grossissement	3,2x	4x	3,3x	4x	3,5x
Champ de vision (mm)	115	93	100	81	86
Distance de travail (mm)	400	350	350	300	300
Distance de travail (pouces)	16	14	14	12	12
Grossissement	4,3x	3,6x	4,5x	4x	5x
Champ de vision (mm)	68	71	56	56	44

Les loupes binoculaires EyeMag Pro F et EyeMag Pro S et leurs accessoires sont conformes aux normes :

- DIN EN ISO 9001
- DIN EN ISO 13485

EyeMag est le nom de la marque déposée par Carl Zeiss.

Carl Zeiss Surgical GmbH

Une entreprise de Carl Zeiss Meditec AG
73446 Oberkochen
Fax : +49 (0) 73 64 20-48 23
Courriel : surgical@meditec.zeiss.com
www.meditec.zeiss.com/loupes
www.meditec.zeiss.com/contacts

Optique de qualité et design haut de gamme

Voir avec précision ...

- Haute qualité optique et fidélité des couleurs – une image nette jusque sur les bords
- Excellente orientation spatiale grâce à une profondeur de champ élevée
- Grands champs de vision pour une bonne vue d'ensemble

Travailler en toute décontraction ...

- Excellent confort de port grâce à la forme ergonomique des deux variantes de support (serre-tête S, monture en titane F)
- Réglages individuels permettant de maintenir une posture droite quel que soit l'angle d'inclinaison
- Position de traitement optimale due à une gamme étendue de distances de travail

Traiter rapidement et avec un grand confort ...

- Mise en œuvre rapide et intuitive grâce à un ajustage facile
- Fonction « Flip-up » pour garder le contact visuel avec le patient et ne rien perdre de vue
- Garniture de protection stérilisable permettant de relever et d'abaisser le système dans des conditions stériles

Gamme de produits

Loupes binoculaires EyeMag Pro (système optique de Kepler)

- Loupe binoculaire EyeMag Pro F
(support : monture en titane, disponible en trois tailles)
- Loupe binoculaire EyeMag Pro S (support : serre-tête)
- Verres protecteurs d'objectif
- Garniture de protection stérilisable
- Microfibre spéciale optiques

