



i.Terminal[®] 2

Le choix préféré pour la croissance de l'entreprise.

Avec i.Terminal[®] 2, le dernier appareil de centrage ZEISS, les paramètres d'ajustement sont saisis numériquement pour une personnalisation avancée des verres.

L'ajustement des verres joue un rôle clé dans l'optimisation du confort visuel étant donné que les erreurs d'ajustement peuvent réduire de jusqu'à 40% la performance des verres. i.Terminal[®] 2 saisit et calcule les paramètres individuels de votre client d'un simple clic et avec une précision de 0,1 mm qui peut entraîner une réduction du nombre de réclamations, moins de non-adaptations et une vision détendue pour vos clients.

Avec l'aide d'i.Terminal® 2, l'ajustement des verres devient un moment confortable et appréciable pour vos clients étant donné qu'ils voient que vous êtes prêt à faire l'effort de leur fournir la dernière conception de verre et de leur garantir une vision détendue.




Aperçu des faits

- L'utilisation de i.Terminal® 2 est 60% plus rapide que celle des procédures de mesure manuelle
- La prise de mesures personnelles à l'aide d'un i.Terminal® 2 est 84% plus précise qu'un processus manuel.
- Permet la mesure pour des clients très amétropes, grâce à la technologie déposée de focalisation.
- Peut être utilisé avec tous les types de montures, y compris les lunettes de soleil de grande taille et les montures sport
- Acquisition photographique rapide
- La technologie autofocus permet une certaine flexibilité dans le positionnement du client
- Un logiciel intuitif avec une option d'utilisation de l'écran tactile et la reconnaissance automatique de mesures suspectes
- S'adapte à diverses tailles comprises entre ~120 et 208 cm permettant un usage pratique pour des enfants et des clients plus grands ou en fauteuil roulant

(Source : essai interne de i.Terminal 2 mené par un professionnel de la vue au Royaume-Uni en 2012)

En 60 secondes, i.Terminal® 2 peut saisir et calculer différents paramètres d'ajustement comprenant :

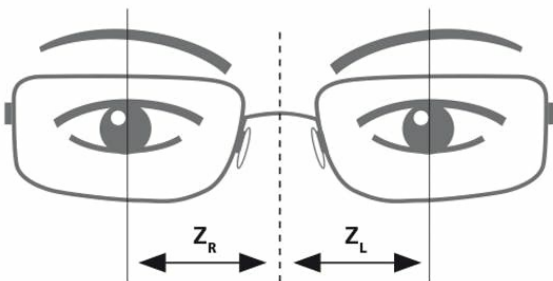

- Données de la monture (A, B, DBL= largeur du pont)
- Distance interpupillaire (PD)
- Distance pupillaire monoculaire (mono PD)
- Hauteur d'ajustement, hauteur de segment
- Distance Verre-Œil (DVO)
- Angle pantoscopique
- Angle de galbe

Distance interpupillaire




Examiner les résultats est maintenant plus rapide et plus aisé qu'avant.

Tous les paramètres d'ajustement sont visibles d'un coup d'œil et les résultats peuvent être imprimés, transférés à i.Com 2 ainsi qu'à des systèmes de gestion de cabinet de tierce partie pour commander les

verres.

Eye Pair		Frame		Lens	
Total PD	58.1 mm	BYD	12.4 mm	Blank type	RundMittelwert
#	1	Plane	13.6 °	Blank diameter	65
PD	29.7 mm	Wing	13.2 °	Lens stamp	Gleitsicht_Individuell
x	22.6 mm	A	52.4 mm	Eye/F	40
PH	17.5 mm	B	27.4 mm	Drop angle	
Seg. Height		OMC	15.3 mm		

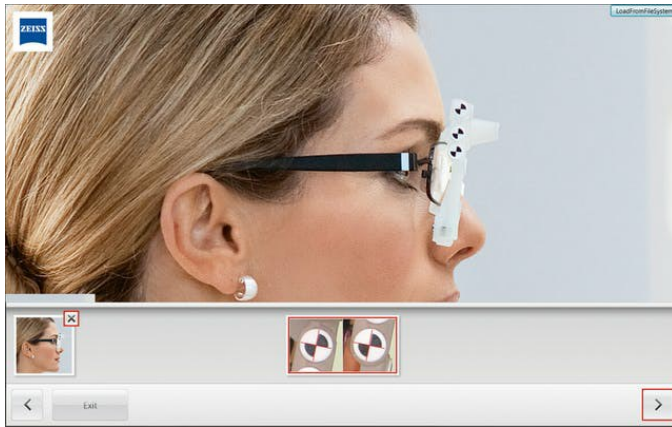

Son interface utilisateur simple et confortable permet un fonctionnement aisé directement à l'écran de votre PC.



Démarrez la borne de centrage ZEISS i.Terminal 2 directement à partir du logiciel ZEISS i.Com installé sur votre PC ou à partir du logiciel nomade ZEISS i.Com mobile via votre tablette iPad

La colonne de prise de mesures ZEISS i.Terminal 2 est disponible avec le logiciel nomade ZEISS i.Com mobile (pour tablette iPad) ou le logiciel i.Com de ZEISS pour PC WIN incluant le boîtier du serveur ZEISS i.Com, votre unité de commande personnelle pour transférer facilement des données vers votre cabinet d'optique. (Écran / iPad non fourni)


[> Pour en savoir plus sur i.Com](#)

Produits afférents



ZEISS unifocal Individual
Les verres unifocaux personnalisés

[En savoir plus](#)

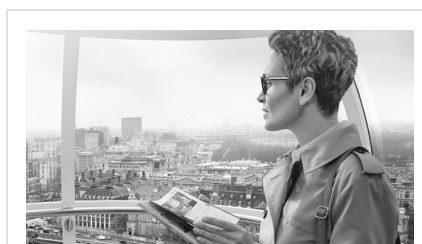

**Verres progressifs
ZEISS Precision Individual 2.**

Conçus sur mesure pour répondre à toutes les exigences individuelles.

[En savoir plus](#)

ZEISS est l'un des principaux fabricants mondiaux de verres de lunettes et s'engage à offrir un maximum de précision et de confort. ZEISS conçoit et produit des verres, des instruments et des services innovants, pour améliorer sans cesse la santé visuelle de tous.



Contactez-nous pour commencer

Service à la clientèle ZEISS

+33 820 01 35 35

Adresse électronique



Explorer

Comprendre la vision
Santé + prévention
Style de vie + mode
Conduite + mobilité
Sport + loisirs
Vie professionnelle

M'aider à choisir

Lunettes de lecture + lunettes pour la vision de loin
Verres progressifs
Lunettes de soleil
Lunettes de travail
Lunettes de sport
Lunettes pour enfants

Services

Mon Profil Visuel
Dépistage des troubles visuels en ligne
Accéder à votre e.certificat

Pour les professionnels de la vue

Instruments + technologies
Verres de lunettes ZEISS
Solutions de nettoyage ZEISS
PartnerNet
VisuStore

Traitements des verres
Lentilles de contact
Nettoyer ses verres de lunettes
Chez l'opticien

[ZEISS France](#) | [ZEISS dans le monde](#) | [Career Global](#) | [Press and Media Global](#)

[Responsable de la publication](#) | [Informations légales](#) | [Protection des données](#) | [Préférences de cookies](#)