



DuraVision® Sun

ZEISS DuraVision Sun pour réduire la réflexion des UV en face arrière, développé pour les verres teintés.



Le traitement ZEISS DuraVision Sun Traitement est un antireflet face interne, idéal pour éviter la fatigue visuelle due aux rayonnements UV.




protection UV des deux côtés.

Pour offrir à vos patients une protection efficace, ZEISS a conçu une couche antireflet supplémentaire qui se trouve à l'arrière du verre et limite la réflexion de lumière indirecte vers l'œil, complétant la protection offerte par la technologie ZEISS UVProtect qui bloque tout rayonnement UV direct arrivant par l'avant pour l'ensemble des verres organiques incolores.

Plus de 90 % des rayons UV arrivent de façon directe, par l'avant. Cependant, une part moindre d'entre eux frappe indirectement par les côtés et l'arrière. Certains rayons UV pouvant être réfléchis vers l'œil par la surface arrière des verres, les revêtements antireflet ZEISS ont été conçus pour avoir un faible pouvoir de réflexion dans la plage du spectre des rayons UV.

La protection UV de la surface arrière fait désormais partie des caractéristiques standard de tout antireflet ZEISS lorsqu'il est combiné avec la technologie ZEISS UVProtect.

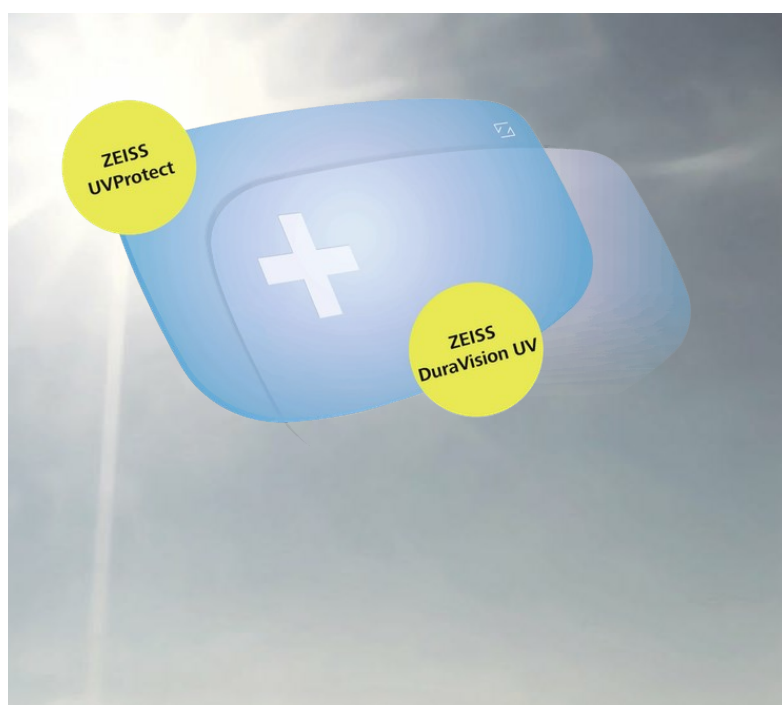

ZEISS est l'un des principaux fabricants mondiaux de verres de lunettes et s'engage à offrir un maximum de précision et de confort. ZEISS conçoit et produit des verres, des instruments et des services innovants, pour améliorer sans cesse la santé visuelle de tous.

Contactez-nous pour commencer

Service à la clientèle ZEISS

+33 820 01 35 35

Adresse électronique





Explorer

Comprendre la vision
Santé + prévention
Style de vie + mode
Conduite + mobilité
Sport + loisirs
Vie professionnelle

M'aider à choisir

Lunettes de lecture + lunettes pour la vision de loin
Verres progressifs
Lunettes de soleil
Lunettes de travail
Lunettes de sport
Lunettes pour enfants
Traitements des verres
Lentilles de contact
Nettoyer ses verres de lunettes
Chez l'opticien

Services

Mon Profil Visuel
Dépistage des troubles visuels en ligne
Accéder à votre e.certificat

Pour les professionnels de la vue

Instruments + technologies
Verres de lunettes ZEISS
Solutions de nettoyage ZEISS
PartnerNet
VisuStore